



Balio

Описание

- 1 - Удлиненные нейлоновые щетинки;
- 2 - Съемная насадка;
- 3 - Подсветка;
- 4 - Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ.
- 5 - Батарейка
- 6 - Крышка отсека для батареек

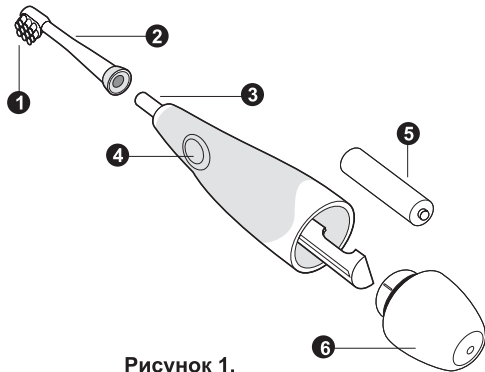


Рисунок 1.

Электрическая зубная щетка Модель: SB-01

Руководство пользователя

Введение

Электрическая звуковая зубная щетка **Balio, модель SB-01**, предназначена для эффективного и бережного ухода за первыми молочными зубами малыша в домашних условиях.

Более качественный уход за зубами, по сравнению с обычной зубной щеткой, обеспечивается звуковым принципом работы: очищение зубов происходит при помощи колебательного движения щетинок с частотой 16000 движений в минуту.

Мягкие нейлоновые щетинки массируют десны и способствуют улучшению кровоснабжения. Малыш, привыкая к звуку зубной щетки, впоследствии не боится звука бормашины в стоматологическом кабинете.

Для обеспечения длительной и безопасной работы устройства крайне важно внимательно прочитать настоящее руководство и следовать ему в процессе эксплуатации.

Производитель не несет ответственности за работу прибора при нарушении правил эксплуатации, описанных в данном Руководстве.

Сохраняйте Руководство пользователя на все время, планируемое для использования устройства.

Подготовка к работе

Установка / замена батареек

Поверните крышку отсека для батареек против часовой стрелки и снимите ее. Вставьте новую батарейку (1 шт. типа AAA 1,5В). Установите крышку отсека для батареек обратно таким образом, чтобы стрелка на корпусе зубной щетки и отметка на крышке отсека для батареек находились на одном уровне. Поверните крышку отсека для батареек по часовой стрелке до упора.

Установка / замена съемной насадки

- Поверните насадку против часовой стрелки и снимите ее.

Внимание! Для правильной установки и фиксации насадки необходимо полностью совместить пазы на насадке с пазами на щетке таким образом, чтобы насадка коснулась корпуса щетки, и повернуть ее по часовой стрелке до упора.

- Через 2-3 месяца с начала использования зубной щетки рекомендуется заменить насадку на запасную (входит в комплект поставки).

Эксплуатация

- Перед первым использованием снимите насадку с корпуса зубной щетки и тщательно вымойте насадку теплой водой.
- Установите насадку на корпус зубной щетки.
- Намочите щетинки и нанесите на них необходимое количество зубной пасты.
- Поместите зубную щетку под небольшим наклоном к линии десен.

- Включите зубную щетку, дважды нажав кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. на корпусе зубной щетки.

При первом нажатии загорится подсветка, при втором - зубная щетка начнет вибрировать.

- Плавно передвигайте зубную щетку вверх и вниз, бережно очищая поверхность зубов и массируя десны.

- Средняя продолжительность чистки зубов составляет 2 минуты.

Зубная щетка отключается автоматически по истечении указанного времени.

- Самостоятельно можно выключить зубную щетку, нажав на корпусе кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.

Внимание! Зубная щетка — это не игрушка!

- Дети должны чистить зубы под контролем взрослых!

Срок гарантии: 1 год с момента продажи через розничную сеть.

Технические характеристики:

Питание: батарейка 1 шт. типа ААА 1,5В

Частота: 16000 движений в минуту

Материал: мягкий нейлон, АБС и ТПЕ пластик.

Поставщик: ООО «Рубиком» 140100
Московская обл., г. Раменское, ул. Карла
Маркса, д. 5, тел: +7 499 130 92 65
Импортер: ООО «Рубиком» 140100
Московская обл., г. Раменское, ул. Карла
Маркса, д. 5, тел: +7 499 130 92 65
Производитель: Производитель: Нингбо
Сеаго Электрик Ко., Лтд
Адрес: №239, Жиангху Роуд, Си Зон
Хонганг Индастриал Парк, Жиангбей
Дистрикт, Нингбо, КНР
Дата изготовления указана на упаковке.
Срок годности не ограничен.

